




RELENZA™

瑞樂沙旋達碟 本藥限由醫師處方使用

ZANAMIVIR FOR INHALATION

此份資料將教導病患您如何使用瑞樂沙旋達碟，請仔細閱讀以下資料，如果對於瑞樂沙旋達碟有任何的問題，請向您的醫生或藥師諮詢。

碟式吸入器 內部零件圖

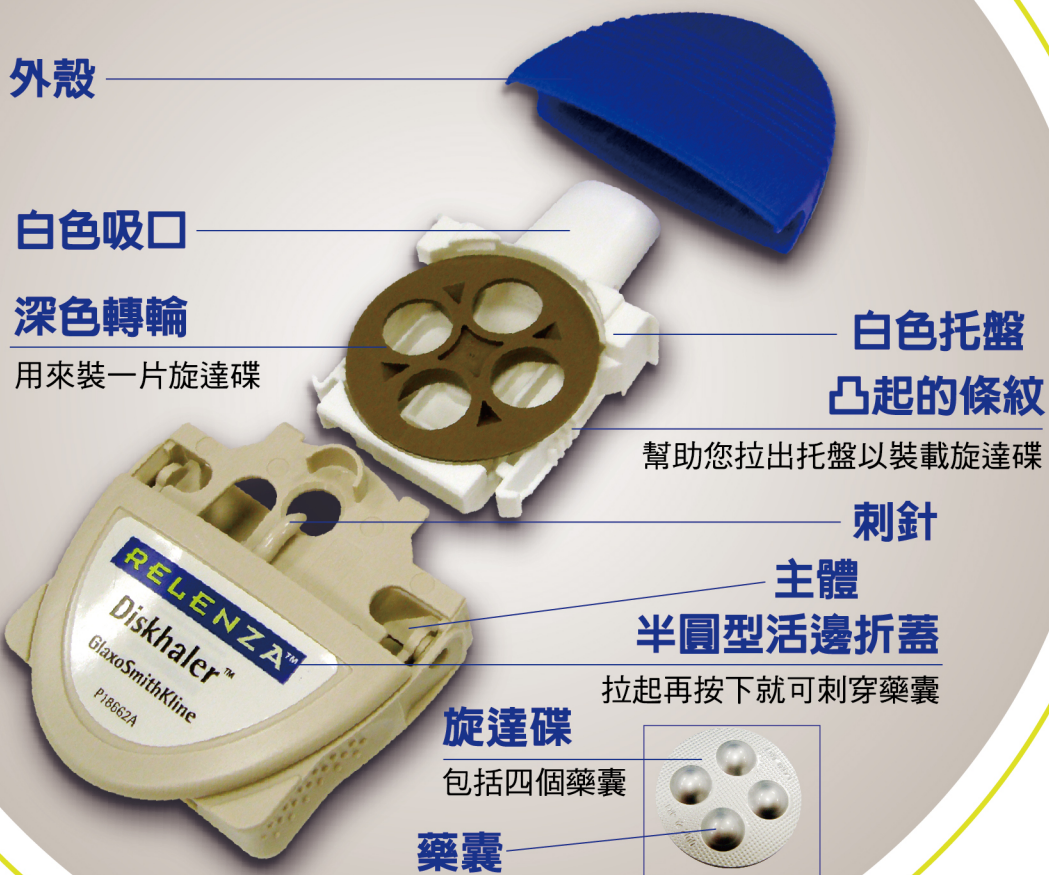

瑞樂沙旋達碟 Relenza Rotadisk™ 重要使用安全資訊：

1. 使用本藥後，若症狀未改善或出現其他不舒服的症狀時，請告知您的醫生或藥師。
2. 使用本藥後，若發生嚴重的呼吸道症狀(如：胸悶、呼吸急促、呼吸困難)，請立即停用本藥，並聯絡醫生或前往鄰近的醫院請求協助。
3. 在使用瑞樂沙旋達碟時，若同時有使用其他治療氣喘或慢性肺病的藥物，可繼續使用該藥物。
4. 若有使用其他吸入型藥物，請先吸入該藥物後，再使用瑞樂沙旋達碟。
5. 若您有氣喘或其他慢性肺病，請在使用瑞樂沙旋達碟前，確認您有足夠的「急救緩解藥物吸入劑」。





RELENZA™

ZANAMIVIR FOR INHALATION

瑞樂沙旋達碟 使用流程

一、裝置旋達碟

1. 脫開藍色外殼




2. 拉開白色托盤



3. 壓住兩側的凸起條紋來將白色托盤脫離主體



4. 裝入一片新的旋達碟於轉輪上，印刷面朝上

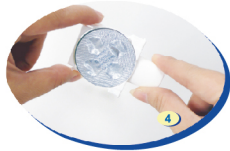

5. 將裝有旋達碟的白色托盤推回原位



二、吸入前準備

1. 水平檢查吸口內、外側是否清潔



2. 將折蓋拉起至垂直後推回，如此可刺破一個藥囊。確保旋達碟維持水平直到吸藥完成



三、連續吸入兩劑量

1. 於舒適狀態下盡量呼氣，此時將吸入器遠離嘴巴



3. 拉出白色托盤後並推回白色托盤，此動作會將下一個藥囊推向刺針下方



2. 將吸口置於下上牙齒間，並維持吸入器的水平。緊閉雙唇包住吸口，但不要咬或將吸口兩側的氣孔堵住。

透過吸口做一個快且深的吸氣來吸入藥劑。摒住呼吸2秒並將吸入器移開嘴巴



4. 折蓋拉起至垂直並推回，刺破第二個藥囊，準備吸藥



5. 吸入第二劑

重複步驟三裡的1,2,3



建議劑量
**早晚一次
每次兩劑**

四顆藥囊用畢，
重複步驟一

四、結束用藥

1. 水平檢查吸口內、外側是否清潔



2. 蓋回藍色外殼



請連結至 www.gsk.tw 網址觀看瑞樂沙旋達碟使用方式教學影片